

OMRON

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR

Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

CE 0197 UK CA 0086

Úvod

Děkujeme za zakoupení digitálního teploměru Flex Temp Smart společnosti OMRON. Před použitím si důkladně přečtěte tento návod k obsluze.

Účel použití

Tento teploměr zajišťuje bezpečné, přesné a rychlé měření u pacientů všech generací. Teplotu můžete měřit v ústech (orálně), pod paží (axilárně) nebo v konečnicku (rektálně). Tento teploměr nepředstavuje riziko rozbití skla ani vytečení rtuti. Berte v úvahu, že Vaši tělesnou teplotu ovlivňuje kouření, jídlo nebo pití. Tento teploměr je určen k vícenásobnému použití u více pacientů. Máte-li nějaké dotazy ohledně konkrétních teplot, obraťte se na svého lékaře.

Předpokládaný uživatel

S teploměrem smí zacházet osobou, která rozumí tomuto návodu k obsluze. (Mezi obsluhující osoby mohou patřit i samotní pacienti). Je určen zejména k domácímu použití.

Důležité bezpečnostní pokyny

Abyste produkt používali správně, vždy se řiďte základními bezpečnostními pokyny, včetně následujících bezpečnostních zásad.

⚠ Upozornění

- Vysoká nebo dlouhotrvající horečka vyžaduje odbornou lékařskou léčbu, zejména u malých dětí. Obrat' se prosím na svého lékaře.
- Pečlivě si přečtěte přiložené pokyny a řiďte se jimi, abyste teplotu měřili přesně. Berte v úvahu, že měření teploty ovlivňuje mnoho faktorů, jako je fyzická námaha, pití horkých nebo studených nápojů před měřením teploty a také technika měření.
- Během měření buďte v klidu.
- Použití naměřené teploty k vlastnímu stanovení diagnózy je nebezpečné a může vést ke zhoršení současného stavu. Interpretaci výsledků konzultujte s lékařem.
- Teploměr se používá k orálnímu, rektálnímu nebo axilárnímu měření teploty. Nepokoušejte se teplotu měřit na jiných místech, jako jsou uši, mohlo by dojít k chybnému měření a to by mohlo vést k poranění.
- Teploměr skladujte mimo dosah dětí. Nedopusťte, aby si děti měřily teplotu samy. Děti bez dozoru by se při měření teploty mohly poranit.
- Nenechávejte baterii, kryt baterie nebo kryt sondy v dosahu dětí. Děti je mohou spolknout. Pokud dítě spolkne baterii, kryt baterie nebo kryt sondy, ihned kontaktujte lékaře.
- Nepoužívejte jeden kryt sondy vícekrát. Mohlo by dojít ke křížové infekci.
- Nemějte mokrym teploměrem, výsledky měření mohou být nepřesné.
- Produkt obsahuje malé části, které mohou v případě spolknutí malými dětmi představovat riziko udušení.
- Nepoužívejte teploměr současně s jinými zdravotnickými elektrickými (ME) zařízeními. Může to způsobovat nesprávnou funkci zařízení a vést k nesprávným výsledkům měření.

⚠ Bezpečnostní opatření


- Vyjmete tento teploměr z obalu a zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je prostředek poškozen, NEPOUŽÍVEJTE JEJ a obraťte se na maloobchodního prodejce nebo distributora společnosti OMRON.
- Do teploměru nekladejte. Mohlo by to vést k poškození a/nebo poranění.
- Teploměr nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by to vést k nepřesnému měření.
- Baterii nespalujte. Mohlo by dojít k výbuchu.
- Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu (+ –). Nedodržením tohoto pokynu může dojít k vytečení elektrolytu z baterii, vzniku tepla nebo roztržení baterii a k následnému poškození teploměru.
- Pokud nebudete teploměr používat déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. Nedodržením tohoto pokynu může dojít k vytečení elektrolytu z baterii, vzniku tepla nebo roztržení baterii a k následnému poškození teploměru.
- Nepoužívejte teploměr v místech se silným elektrostatickým nábojem nebo elektromagnetickým polem. V opačném případě může dojít k nepřesnému měření nebo k poruše teploměru.
- Rektální měření nepoužívejte u osob s rektálními poruchami. V opačném případě může dojít ke zhoršení poruchy.
- Na teploměr ani pevné pouzdro neslapejte.
- Špičku teploměru nenahýbejte více než do úhlu 45 stupňů.
- Během měření zajistěte, aby se do vzdálenosti 30 cm od zařízení nenacházely žádné mobilní telefony ani jiná elektrická zařízení, která vyzařují elektromagnetické pole. Může to způsobovat nesprávnou funkci zařízení a vést k nesprávným výsledkům měření.
- Pokud se vyskytne podráždění pokožky nebo jiné obtíže, přestaňte prostředek používat a poraďte se se svým lékařem.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte teploměr k měření něčeho jiného, než je tělesná teplota.
- Teploměr ani skladovací pouzdro neupusťte na zem a nevystavujte je nárazu či vibracím.

1. Přepnutí mezi stupni Fahrenheita a stupni Celsia

Stisknete tlačítko  na 7 sekund, dokud se neozve pípnutí. Jakmile se ozve pípnutí, obrazovka se přepne na jiný měřicí systém.

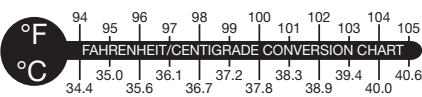

2. Použití teploměru

1. Stisknete tlačítko .

Na displeji se na několik vteřin zobrazí předchozí naměřená hodnota. V rámci interního testování se na displeji zobrazí hodnota 37,0 °C (98,6 °F).

Poznámka: Zobrazí-li se jiná hodnota teploty než 37,0 °C (98,6 °F), projděte si část „6. Indikátory na displeji a řešení problémů“, kde naleznete podrobnosti ohledně řešení problému.

2. Umístíte teploměr na místo měření.

Poznámka: Nezobrazí-li se indikátor „L“ (zobrazena pouze teplota), nejedná se o chybu. Můžete měřit teplotu.

3. Ozve se tříkrátký zvukový signál [pip-pip-pip], což indikuje, že teplota byla změřena. Vyjměte teploměr z místa měření a přečtěte teplotu.

Časy pro zvukové upozornění

Rektálně: cca po 10 vteřinách

Ústně: cca po 20 vteřinách

Pod paži: cca po 25 vteřinách*

* Je-li změna teploty dostatečně nízká, aby tělesná teplota byla odečtena dříve, ozve se pípnutí. Skutečně přesné odečítání bude trvat déle, jak je uvedeno v kapitole 9. (V závislosti na okolních podmínkách.)

Poznámky:

- Ozve-li se zvukové upozornění, měření přesto dále probíhá.
- Časy zvukového upozornění vycházejí z okolní teploty 23 stupňů.
- Při měření v ústech a pod paží mohou být zjištěné hodnoty nižší, proto doporučujeme použít rektální měření, které je nejpřesnější.

4. Teploměr vypněte. Před uložením do pouzdra teploměr očistěte a vydezinfikujte.

Poznámky:

- Zjištěná hodnota se automaticky uloží do paměti.
- S ohledem na úsporu baterie vypněte teploměr ručně. Teploměr se automaticky vypne 30 minut po použití nebo po 3 minutách, jestliže jej zapnete, ale nebudete jej používat.

3. Zobrazení poslední naměřené teploty

Pro zobrazení poslední naměřené teploty stisknete tlačítko . Více informací naleznete v části „2. Použití teploměru“.

4. Správné měření

Přesnost měření nelze zajistit, pokud nepoužijete správnou metodu měření.

Rektální měření:

- Při rektálním měření se doporučuje vždy používat kryt sondy.
- Obvykle se používá u malých dětí, u nichž je měření v ústech a pod paží obtížné.
- Aplikujte gel, který nedráždí pokožku.
- Špičku čidla opatrně zasuňte do konečniku – ne však hlouběji než 1,3 cm. V případě odporu při zasouvání špičky do konečniku nepoužívejte sílu.
- Po každém použití teploměr dezinfikujte.


Orální měření (pro osoby od 4 let):

Před odečtením teploty musí být ústa zavřená po dobu 5 minut.

- Zasuňte teploměr pod jazyk tak, aby ležel vlevo nebo vpravo od kořene jazyka.
- Teploměr na místě přidržíte jazykem.
- Teploměr přidržíte rukou, aby neklouzal.

Měření pod paží (axilární):

- Umístíte špičku čidla do středu podpažní jamky.

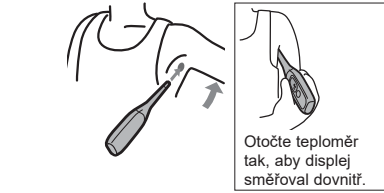


Následující faktory mohou ovlivnit přesnost měření:

- Měření teploty těsně po cvičení, koupání, jídlu nebo pití povede k nepřesným výsledkům.
- Správně:** Před měřením teploty počkejte alespoň 30 minut.
- Měření teploty po vykonávání pohybu.
- Správně:** Teplotu změřte ihned po probuzení nebo alespoň 30 minut po vykonávání pohybu.

* Pohyb po probuzení zvyšuje tělesnou teplotu.

Následující faktory mohou ovlivnit přesnost měření pod paží:

- Silné pocení pod paží
- Správně:** Před měřením místo osušte.
- Měření teploty poté, co jste byli delší dobu přikryti.

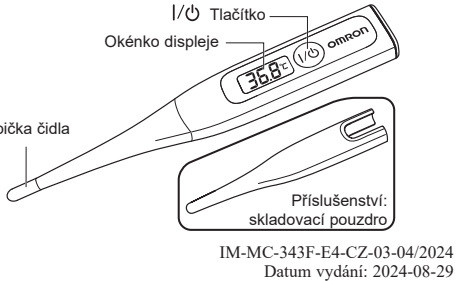

IM-MC-343F-E4-CZ-03-04/2024
Datum vydání: 2024-08-29


5. Výměna baterie

Baterie: Alkalicko-magnéziová knoflíková baterie LR41 (běžně dostupná)
Baterii použijte v rámci uvedeného doporučeného období.

Indikátor výměny baterie ()

Pokud se po zapnutí teploměru zobrazí na displeji indikátor výměny baterie, baterii vyměňte.

1. K odstranění krytu použijte minci.

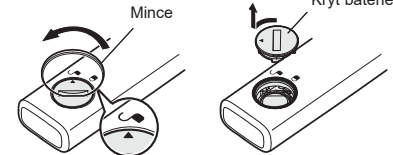

2. Vyjměte baterii.



3. Vložte novou baterii pólovou značkou „+“ směřující nahoru (viz obrázek). Při vkládání baterie dejte pozor na správnou polaritu.

4. K nasazení krytu zpět použijte minci.

5. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

6. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

7. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

8. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

9. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

10. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

11. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

12. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

13. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

14. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

15. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

16. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

17. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

18. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

19. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

20. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

21. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

22. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

23. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

24. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

25. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

26. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

27. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

28. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

29. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

30. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

31. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

32. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

33. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

34. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

35. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

36. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

37. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

38. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

39. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

40. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

41. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

42. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

43. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

44. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

45. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

46. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

47. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

48. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

49. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

50. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

51. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

52. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

53. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

54. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

55. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

56. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

57. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

58. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

59. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

60. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

61. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

62. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

63. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

64. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

65. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

66. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

67. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

68. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

69. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

70. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

71. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

72. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

73. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

74. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

75. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

76. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

77. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

78. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

79. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

80. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

81. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

82. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

83. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

84. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

85. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

86. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

87. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

88. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

89. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

90. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

91. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

92. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

93. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

94. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

95. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

96. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

97. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

98. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

99. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

100. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

101. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

102. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

103. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

104. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

105. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

106. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

107. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

108. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

109. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

110. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

111. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

112. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

113. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

114. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

115. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

116. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

117. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

118. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

119. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

120. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

121. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

122. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

123. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

124. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

125. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

126. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

127. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

128. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

129. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

130. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

131. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

132. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

133. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

134. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

135. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.

136. Zkontrolujte, zda se baterie nasadila správně.