


REF	Referenční katalogové číslo
OMRON	Manžeta Easy Cuff
OMRON	Manžeta Intelli Wrap
OMRON	Komfortní manžeta
TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Datum výroby
	Uživatel si musí prostudovat návod k obsluze.
	Obvod paže
Datum výroby je součástí sériového čísla, které je umístěno na produktu a/nebo prodejním balení: první 4 číslice představují rok výroby, další 2 číslice měsíc výroby a poslední 2 číslice den výroby.	

Popis symbolů	CE UK CA
Označení CE	Značení UKCA
Číslo šarže	LOT
Jedinečný identifikátor prostředku	UDI
Zdravotnický prostředek	MD
Omezení teploty	
Omezení vlhkosti	
Omezení atmosférického tlaku	
Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením	
Indikátor umístění manžety pro levou ruku	INDEX
Ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnání na brachiální tepnu	ART.
Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.	
Není vyrobeno z latexu	LATEX FREE
Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.	

Veškeré závazné incidenty, k nimž došlo v souvislosti s tímto přístrojem, nahlašujte výrobci a odpovídajícím úřadům členského státu EU, ve kterém se nacházíte.

Provozní podmínky	15 až 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Podmínky pro skladování a přepravu	-20 až +60 °C (-4 až 140 °F) 10 až 95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Obsah balení	Manžeta, návod k obsluze, vzduchové zástřeky
Životnost (provozovatelnost), záruka	1 rok

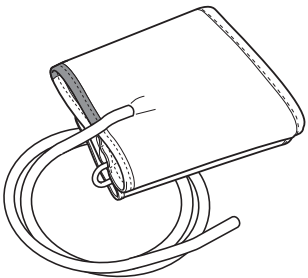

Manžeta CS2 (pediatrická)

Malá manžeta

• Návod k obsluze

Výrobce	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
Zástupce v EU	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Dovozce do EU	
Výrobní závod	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian, 116600 Liaoning Čínská lidová republika
Pobočky	Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
Distibuce a servis pro ČR	CELIMED s.r.o. Sociální péče 3487/5a, 400 11 Ústí na Labem pozáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz

CELIMED



Návod k obsluze


- Manžetu neperte ani nemanáčejte.
- nesprávně zástřtky může dojít k úniku vzduchu a nesprávným výsledkům.
- Ověřte si prosím, kterou zástřtku na vašem přístroji je třeba použít. Při použití systému HEM-CS24, jak je uvedeno na štítku manžety vedle vzduchového konektoru. Tato manžeta funguje pouze s monitory krevního tlaku OMRON kompatibilními se tlaku společností OMRON.
- Tato manžeta společností OMRON může být připojena na různé monitory krevního

Upozornění: Označuje potenciálně nebezpečné situace, které – pokud jím nezabráníte – mohou vést k lehkému nebo středně těžkému zranění uživatele či pacienta nebo k poškození vybavení či jiných předmětů.

Návod si ponechte pro budoucí použití. Pokud požadujete konkrétní informace o vlastním krevním tlaku, PORADTE SE S LÉKÁŘEM.

Z bezpečnostních důvodů je nutno pozorně dodržovat tento návod. Návod si ponechte pro budoucí použití. Pokud požadujete konkrétní informace o vlastním krevním tlaku, PORADTE SE S LÉKÁŘEM.


Děkujeme vám za zakoupení malé manžety společností OMRON. Tato manžeta je vhodná pro paži o obvodu 17 až 22 centimetrů. Viz originální návod vašeho měřiče krevního tlaku.

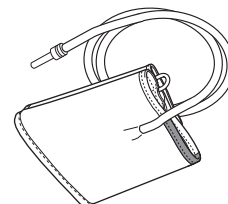

CELIMED

Manžeta CS2 (pediatrická) (HEM-CS24)

POZNÁMKY

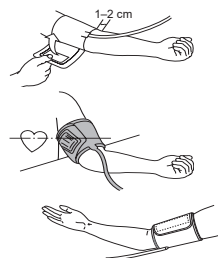

- Dejte paži do správné polohy.
 - Vzduchová hadička by měla směřovat dolů podle vnitřní strany vašeho předloktí a měla by být souběžně s vaším prostřednímčkem.
 - Spodní strana manžety by měla být asi 1 až 2 cm nad vaším loktem.
 - Umístěte manžetu na paži tak, aby byla značka (šipka pod hadičkou) vystředěna na vnitřní části paže a odtud směřovala dolů.

Měření na pravé paži

Upevněte manžetu tak, aby vzduchová hadička vedla kolem lokte na straně malíčku.

- Dávejte pozor, abyste se neopírali ramenem o vzduchovou hadičku, anebo jinak neomezovali přívod vzduchu do manžety.
- Manžeta by měla být umístěna 1 až 2 cm nad loktem.

- Poté, co je manžeta správně umístěna, PEVNĚ utáhněte pásek se suchým zipem.

- Nepřikládejte manžetu přes silné oděvy a nevyhnujte si rukáv, je-li příliš těsný.
- Manžetu vyrovnejte do výšky vašeho srdce (do výšky prsou). V případě potřeby použijte k podepření lokte polštářek nebo jinou vhodnou podložku.
- Manžetu vyčistěte pomocí měkké suché látky, nebo měkké vlhké látky a neutrálního mýdla.
- K čištění manžety nepoužívejte benzín, ředidla ani jiné tekavé kapaliny.
- Manžetu neskladujte na místech vystavených extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, prachu nebo korozivním výparům.
- Vzduchovou hadičku nadměrně neohýbejte ani nemačkejte.

CELIMED

Pokyny

Údržba

Technické údaje:

Popis výrobku	Manžeta měřiče krevního tlaku OMRON
Model	Malá manžeta CS2 (HEM-CS24)
Obvod paže	17 až 22 cm
Rozměry manžety	Přibližně 115 mm × 367 mm
Rozsah tlaku manžety	Tlak: 0 až 299 mmHg
Přesnost	Tlak: ±3 mmHg
Klasifikace	Třída I

CELIMED